

タッチパネルで  
6段階振動！  
レベル設定の  
メモリー機能付！



## エンゼルバイブレーターデジタル

# DAIEI DENTAL VIBRATOR

DAIEI  
*Angel*



価格等の情報は  
こちらから




強力6段階振動で  
脱泡・埋没が楽！  
防音効果のある  
防振マット付！

一般医療機器 届出番号 27B3X0020900023

## 強カバイブレーター

# Performance & Technology

## エンゼルバイブレーターデジタル

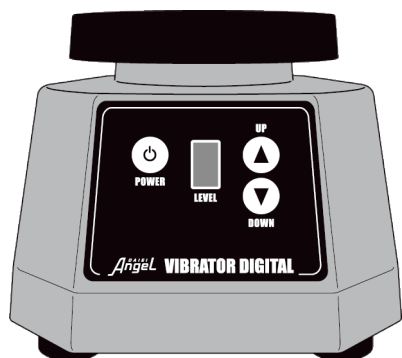

名称	エンゼルバイブレーターデジタル
本体寸法	W140×H110×D140 (mm)
振動テーブル寸法	Φ108 (mm)
電源・電圧	AC100V 150W 50Hz / 60Hz
重量	2.0kg
定格時間	5分
レベル調整	タッチパネルによる6段階設定

タッチパネルによって6段階の振動調整が出来る、卓上小型バイブレーターです。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけでお使いいただけます。振動テーブルはラバー性なので、全面のフラットパネルと共に清掃性が高く、故障も少ない設計です。

## 強カバイブレーター



丸型フットスイッチ(別売)  
踏んでいる間ON

名称	強カバイブレーター
本体寸法	W205×H102×D165 (mm)
振動テーブル寸法	W205×D165 (mm)
電力	AC100V 100W
重量	6.0kg
定格時間	10分
レベル調整	スイッチによる6段階設定

振動レベルの6段階切り替えにより、脱泡・埋没作業が楽におこなえます。

防振マットは、防音効果もあります。  
別売フットスイッチを利用すると作業性がより向上します。  
振動テーブルはラバー性なので、清掃性が高く、故障も少ない設計です。

一般医療機器 届出番号 27B3X00209000023

※仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2024.06

禁無断転載

●お問合せは下記まで

製造販売元

**DAIEI** **Angel** 大榮歯科産業株式会社

<http://www.daiei-dental.jp>

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897