

循環式サンドブラスター (ペンタイプ)



# CYCLE BLASTER Jr.

サイクルブラスター Jr.

**DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN



価格等の情報は  
こちらから

# CYCLE BLASTER Jr.

サイクルブラスター Jr.

サイクルブラスター Jr. は、小型の循環式サンドブラスターで、ノズルは、固定して使うことも、ペンシルタイプとして使うこともできます。研磨材は、荒、細、2種類のガラスビーズが付属しているため、用途に応じてお選びいただくことができます。

## 特長


- 研磨材の補充がいらぬ循環方式。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 噴射力抜群で、サンド処理がスムーズ。
- 視窓の曇り防止に、取り替え簡単な防護シートを装備。
- ハンドピース部で噴射力の調整が可能 (LOW HI)、オプションの減圧コックでさらにデリケートな処理にも対応。



ノズルを固定して使用



ペンシルタイプとして使用

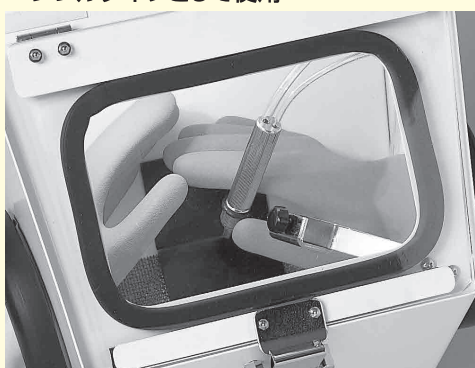

## 付属品

- サンド研磨材(荒) 1.4kg
- サンド研磨材(細) 1.6kg
- 防塵型モーメンタリーフットスイッチ
- 集塵布フィルター(ゴム栓付)
- 視窓防護シート
- 配管用具一式

## 別売品

- 研磨材 酸化アルミナ(A-10) 3kg
- 視窓防護シート(100枚入)

## 仕様

本体寸法：W300×H380×D330mm  
 電源：AC100V 50W  
 重量：7kg  
 研磨材の噴出量：10秒あたり50g(エア圧0.49MPa)  
 作動エア：0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm<sup>2</sup>)

一般的名称: 歯科技工用金属表面加工器 分類: クラスI 許可/届出番号: 27B2X00306K00005

製造販売元

## 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897  
<http://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

2024. 06