


ヒートショック対応・マイコンファーンネス

# AF-Q1

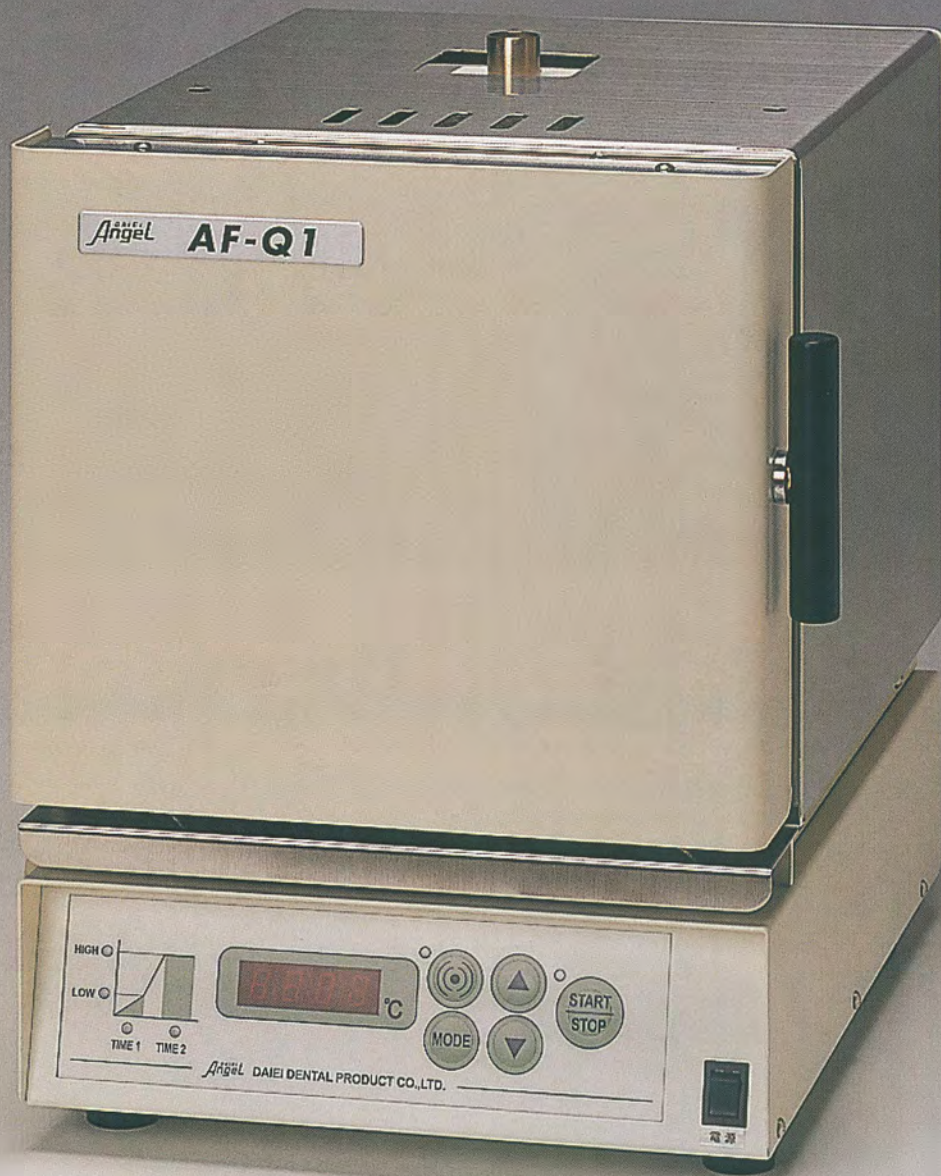

一般医療機器 届出番号27B3X00209000009

**DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.**  
10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

# AF-Q1 エーエフキューワン


一般医療機器 届出番号27B3X00209000009

フルパワーでは700℃まで12分（空焼成時）で到達するハイパワータイプの電気炉ながら、昇温時間を任意に設定する事も可能で、様々な焼成スケジュールに対応します。（登録は1パターン）

タッチキーによる簡単な入力操作で、中間温度/到達時間・最終設定温度/係留時間が設定出来ます。また、設定した焼成スケジュールは電源を切っても記憶しているので、昇温開始は電源を入れてスタートキーを押すだけです。

ボディはステンレス製で腐食に強く、炉内は90mmリングが2個入る大きさです。

高機能でありながら価格を抑えたリーズナブルな電気炉です。

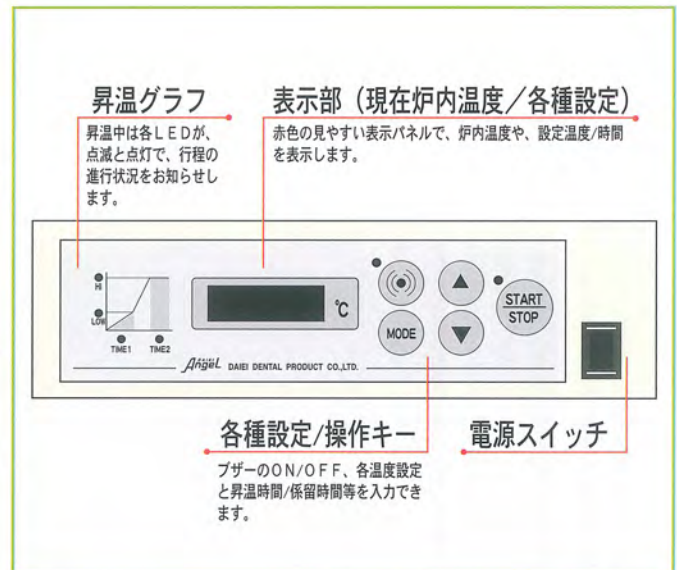

- 最高温度 1000℃
- 常用温度 900℃
- 本体寸法 W285×H355×D370 (mm)
- 炉内寸法 W120×H95×D180 (mm)
- 電源電圧 AC100V 50/60Hz
- 電力 1100W
- 外部電源 100V 300W
- 本体重量 15kg
- 警告装置 熱電対断線警告
- 付属部品 リング受け皿1枚

# ACE-CLEANER エースクリーナー (電気炉用脱臭装置)

一般医療機器 届出番号27B3X00209000020

エンゼル エースクリーナーは、リング焼却時に電気炉から発生する、ススやアンモニア・一酸化炭素等の有害ガスを庫内の再燃焼室に取り込み、大型白金触媒の力で有害物質を吸着、ろ過した上で排出します。これにより、診療室・技工室や戸外へ流れる不快臭を取り除き、術者の健康を守ります。また、快適な環境のもとで能率よく作業ができます。

- 本体寸法 :W230×H185×D210(mm)
- 本体重量 :5kg
- 電源電圧 :AC100V 50/60Hz
- 電力 :300W



## 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。