

DAIEI
Angel



研磨道

CAMPAIGN

2024.12.02-2025.01.31



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD

研磨材

万能艶出し研磨剤 マルチブルー



○金属全般、レジン全般に使用できる万能艶出し研磨材。
大容量で経済的。短時間で艶出しが可能です。
パッケージも研磨材の取出しが楽なスリーブ式。

500g
標準価格 ¥4,900 (税別)

**SPECIAL
PRICE**



ALL MATERIAL

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00306D00001

ダイヤモンド艶出し研磨剤 マルチブルー 煌 (きらめき)



○CAD/CAM冠やジルコニアなどの硬質素材を短時間で天然歯に近い
自然な艶出しが可能なダイヤ入り研磨材。
適度な粘度でブラシ等への付着性が良く、飛散が少なく経済的です。

30g
標準価格 ¥9,800 (税別)

**SPECIAL
PRICE**



CAD/CAM RESIN
ZIRCONIA
CERAMIC

一般医療機器 歯科用研磨器材 12B3X10030000046

義歯専用仕上げ用艶出し研磨剤 フレックスシャインプロ



○軟質～硬質までの全ての義歯床用レジン最終仕上げに
ご使用いただける研磨材です。
軟性固形のためレーズバフとの馴染みも良く、発熱自体
を抑える効果もあり、焼付きも防ぎます。

80g 標準価格 ¥3,200 (税別)
200g 標準価格 ¥6,400 (税別)

**SPECIAL
PRICE**



ALL
DENTURE

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B3X00139000088

義歯専用仕上げ用研磨艶出し剤 フレックスシャインプロペースト



○主にチェアサイドにてご使用いただくペーストタイプ義歯研磨材。
油分多めで高回転でも圧力をかけても焼き付きが起りにくい
ため、ノンクラスプデンチャーでも短時間で滑沢なツヤが得られます。

50g
標準価格 ¥3,700 (税別)

**SPECIAL
PRICE**




ALL
DENTURE

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B3X00139000089

ハンドピース用

ロビンソンブラシ エンゼルロビンソンブラシ

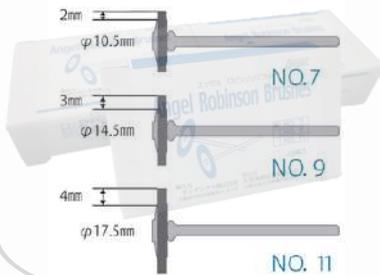

○ソフトな豚毛を使用した研磨材との馴染みも良いロビンソンブラシです。
NO.11は一般的な毛の長さ。NO.7は短毛仕様の為、咬合面の研磨に適しています。

12本入
標準価格 ¥1,600 (税別)

SPECIAL PRICE



ALL MATERIAL

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00041000133

ゴム製研磨材 フレックスコーン



○中研磨用ミディアムハードシリコンポリッシャー。
熱の発生を抑え、軟性レジンから硬質レジン、全ての金属を短時間で荒～中仕上げをこれ1本で仕上げます。

10個入
標準価格 ¥1,800 (税別)

SPECIAL PRICE



ALL MATERIAL

※マンドレルは別売りになります。

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 27B2X00041000218

熱可塑性樹脂専用研磨ブラシ フレックスパイラルホイール



○柔軟性のある樹脂製ブラシで風を巻き込む形状のため、研磨熱の発生を抑える事ができます。低速にて3段階の研磨を行う事で次の仕上げ工程で楽に光沢研磨が可能です。

キット
標準価格 ¥5,000 (税別)

SPECIAL PRICE



THERMOPLASTIC

FS01/FS02/FS03
標準価格 ¥1,800 (税別)


SPECIAL PRICE



CAD/CAMRESIN
CERAMIC

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00041000223/27B2X00041000222

特殊合成繊維研磨材 デンチャーポリッシャー

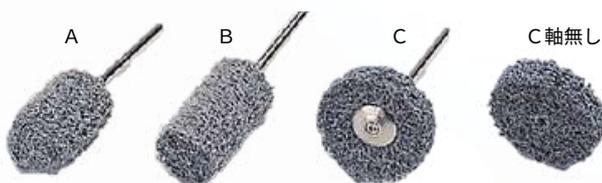

○ペーパー不要でデンチャー全般の粗～中研削作業が可能です。

●レギュラー
A (3本)、B (3本)、C (5本)
標準価格 ¥3,400 (税別)

SPECIAL PRICE



ALL DENTURE

●ラボパック
A (10本)、B (10本)、C (16本)、C軸無し (20本)
標準価格 ¥8,000 (税別)

一般医療機器 歯科用研磨器材 13B3X00108000601

貴金属合金仕上げ用研磨剤 エンゼルシリコンポイント

・低価格帯・高研削力・高耐久性

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 27B2X00306W00003

【DM-13】 【DM-13S】



10本入
標準価格 ¥1,280 (税別)
60本入
標準価格 ¥6,880 (税別)

SPECIAL PRICE

【DM-10】 【DM-11】



8本入
標準価格 ¥1,280 (税別)
50本入
標準価格 ¥6,880 (税別)

SPECIAL PRICE



ALL MATERIAL

レース用

レース用ブラシ UFOレースブラシ

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00306C00001



●12入

1列	標準価格	¥2,900	(税別)
2列	標準価格	¥5,200	(税別)
3列	標準価格	¥7,400	(税別)
4列	標準価格	¥11,000	(税別)

○豚毛を使用し、木軸を採用したレースブラシです。ブラシ密度が高くコシもあるため、毛抜けも少なく効率良く研磨ができます。



SPECIAL PRICE

ALL DENTURE

レース用ブラシ エンゼルレースブラシ

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00306A00001



●12入

1列	標準価格	¥2,700	(税別)
2列	標準価格	¥4,600	(税別)
3列	標準価格	¥5,900	(税別)

○プラスチック軸を採用し、タケノコへの食い込みが良く、研磨時に押し当てても、空転が少なくスムーズに研磨できます。価格も安価に設定しています。




SPECIAL PRICE

ALL DENTURE

レース用ブラシ エンゼルナイロンブラシ

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 27B2X00306A00003

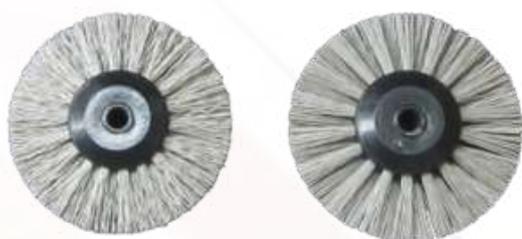

2列	標準価格	¥1,300	(税別)
3列	標準価格	¥1,500	(税別)

ブラシサイズ 70φ
毛の長さ 25mm



ACRYLIC RESIN
POLYCA RESIN

SPECIAL PRICE

○研磨材入りのナイロン繊維ブラシです。義歯床の中・仕上げ研磨用で、高い植毛技術により、最後までしっかり使用できます。アクリルレジン・ポリカーボネート樹脂の研削・研磨・金属等のバリ取り等にご使用いただけます。

レース用バフ エンゼルチャモイスブラシ・ホイール

ACRYLIC RESIN



列	サイズ	長さ	個数	標準価格	(税別)
2列	φ60mm	15mm	1個入	¥1,200	(税別)
3列	φ80mm	20mm	1個入	¥1,400	(税別)
ホイール	φ70mm	-	1個入	¥1,000	(税別)

一般医療機器 歯科用研磨器材 27B2X00306A00002

○ブラシ：デンチャー歯頸部など細かい形状もスムーズに研磨できます。
○ホイール：程よくコシのある鹿革は、綿バフのようにばらけることもないため経済的です。マルチブルーやフレックスシャインプロとの相性も良く、効率良く光沢に仕上がります。

SPECIAL PRICE

レーズ用バフ フレックスフェザーバフ



●容量：12入
幅径：15mm

2.5インチ 標準価格 ¥6,060 (税別)
3インチ 標準価格 ¥6,630 (税別)

ALL DENTURE



SPECIAL PRICE

○ふわふわとした超軟質素材で、軟性表面も傷を付けずに硬質まで全ての義歯素材でご使用いただけるバフです。

フレックスシャインプロ、マルチブルーとの馴染みも抜群です。
内周の糸をほどけば深い研磨にも対応可能です。

レーズ用ホイール フレックスタスクホイール



●容量：1個入
寸法：Φ80mm
幅径：7mm

標準価格
¥2,600 (税別)

SPECIAL PRICE



RECOMMENDED



ALL DENTURE

○片面がシリコンでコーティングされているソフトモスリンバフです。熱可塑性レジンからアクリルレジンまで幅広く使用でき、レーズブラシを本製品に置き換えるだけで仕上げ研磨まで効率良くデンチャー面の研磨が可能になりました。この後はバフを少しかけるだけで滑沢に仕上がります。

リング（黄色部）は切り離し可能で最後までバフを使用できるため、非常に経済的です。

レーズ用研磨砂 火山灰研磨材エンゼルVポリッシュ



粗目 粒径250μm 750 g
細目 粒径70μm 750 g
細々 粒径30μm 1.2kg

標準価格 ¥2,500 (税別)
標準価格 ¥2,500 (税別)
標準価格 ¥3,300 (税別)

SPECIAL PRICE



火山灰をバルーン状に膨らませた特殊加工



ALL DENTURE

○火山灰シリカを主成分としており、多孔質な粉体は親水性が非常に高く、レーズ研磨の粗～仕上げ用として使用できます。また、表面に鋭利な突起が無いので、研磨物に細かいキズをつけずに短時間で研磨が完了します。

研磨関連機器

デンタルスチーマー ロコモ

一般医療機器 歯科技工用形成器具 27B2X00306K00003



寸法：W295xH245xD160mm
 電力：1450W/AC100V
 重量：12kg
 水タンク：4ℓ
 蒸気：貫流式特殊小型ボイラー
 最高圧力：0.9Mpa



ハンドピースホースの長さは75cm/120cmからお選びいただけます。様々な設置環境にも柔軟に対応します。



壁掛け用ハンガー（別売）をご使用いただくことで、壁面に本体を取り付け可能です。

標準価格
 ¥298,000（税別）

SPECIAL PRICE

○ロコモから生成される強力な高圧スチームは洗浄力が高く、洗浄時間を大幅に節約できます。本体はコンパクト設計で水タンクを自由にレイアウトでき、給水も容易です。

電気レーズ エンゼルレーズD

一般医療機器 歯科技工用電気レーズ 27B2X00306M00002



ネジ式ホルダーでしっかりと本体に固定され、脱落を防ぎます。



ON/OFFボタンはフラットで、電源周りの異物混入を回避します。

寸法：W300×H198×D170mm
 電力：0.20kVA
 電源電圧：AC100V/50-60Hz
 重量：約9.6kg
 付属品：
 バフホルダー（右用）、バフホルダー（左用）
 固定金具A・固定ネジ、スパナ（口径8.0）六角レンチ
 回転範囲：無段階（0～10,000rpm）
 最高回転数：10,000rpm

標準価格
 ¥135,000（税別）

SPECIAL PRICE

○無段階変速でのスピード調節のため、直感的感覚で作業を行うことが可能です。

金属床用循環式サンドブラスター サンデックスV



寸法：W350xH570xD385mm
 電力：120W
 電源電圧：AC100V/50-60Hz
 重量：15kg
 エアー圧：0.39～0.69MPa
 集塵装置：エアーノズルによる吸引方式

広口径φ4mmノズルから専用研磨材（カーボランダム）を強く吹き付け、除去作業の手間を軽減します。



標準価格
 ¥298,000（税別）

SPECIAL PRICE

○金属床の埋没材除去を目的に開発されたサンドブラスターです。カーボランダムを用いてサンドブラスト処理を行いますので、硬く焼きついたリン酸塩系埋没材も効率よくはがすことができます。

一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 27B2X00306K00014

サンドブラスター サイクルブラスターシリーズ

一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器
 27B2X00306K00005
 27B2X00306K00006
 27B2X00306K00007



サイクルブラスターJr.（循環式）

標準価格 ¥168,000（税別）

SPECIAL PRICE

サイクルジュニアII（循環+加圧①）

標準価格 ¥218,000（税別）

SPECIAL PRICE

サイクルジュニアIII（循環+加圧②）

標準価格 ¥298,000（税別）

SPECIAL PRICE



左：循環式ノズル（φ2.6mm）
 右：加圧式ノズル（φ0.8mm）



加圧式ノズルを使用した補綴物内面処理

○用途や目的に応じた豊富なバリエーションからお選びいただけます。

卓上自動研磨機 輝 (TERU)



左上 研磨前
左下 中仕上げ後 (湿式)
右上 光沢仕上げ後 (乾式)

SPECIAL PRICE

寸法：W270xH460xD430mm
電力：90VA
電源電圧：AC100-50/60Hz
重量：21kg
付属品：クラウンホルダー (8個)、リテーナーTホルダー (2個)
ポリッシングタンク (2個)、研磨材、コンパウンド (2種)
研磨材洗浄用網袋

一般医療機器 歯科技工用電気レーズ 27B2X00306K00018

標準価格
¥740,000 (税別)

研磨物	研磨時間	
	研磨時間 (中仕上げ)	研磨時間 (光沢仕上げ)
クラウン	5~10分	10~15分
インレー	5~10分	10~15分
ブリッジ	10分~15分	10~15分
クラスプ	10分	10~15分
バー	20分	10~15分

○技工物を保持具で固定し、回転を加える固定バレル研磨 (ジャイロ研磨) 方式で研磨を行います。短時間で効率的な研磨を行う事が可能で、インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、金属床など幅広い症例に対応します。

ショット式研磨機 ショットブラストEZ

一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 27B2X00306K00024



寸法：W310xH760xD410mm
電力：500W
電源電圧：AC100V/50-60Hz
重量：36kg
エア圧：0.3~0.6Mpa

※研磨材は別売りになります。

標準価格
¥850,000 (税別)

SPECIAL PRICE

○特殊な弾性樹脂研磨材 (PAT.) を使用し、研磨物表面の形状を損なわずに滑沢に仕上げる射出式研磨機です。デンチャーメタルフレーム、クラスプ、クラウンブリッジまで幅広く対応し、手作業では磨きにくい箇所や煩雑症例には特に効果を発揮します。素材もCAD/CAMレジン、アクリルレジン、パラジウム、コバルトなど幅広く対応し、チタン床には特に効果的です。

軟化圧接成型器
デュアルフォーマー

加圧成型で再現性の高いマウスピース製作が可能に!

歯科技工用形成器 一般医療機器 27B2X00306K00008



- 丸型、角形シート材に対応、加圧・吸引両用の軟化圧接成型器です。
- マウスガード、ブリーチングトレー、ナイトガードなど各種トレーに対応します。



模型に高さやアンダーカットがある場合は専用の砂の中に模型を設置して製作します。



吸引と加圧ダブル圧接で、ラミネートタイプのマウスガードも作成が可能です。

寸法 W285×H440×D280mm
重量 10 k g
加圧 0.19~0.59MPa
吸引 700mmHg
別売品 加圧ポット
 模固定用砂

標準価格
¥278,000 (税別)

SPECIAL PRICE

電気ファーンズ
MD-R1

700°C到達まで15分、10通りの焼成プログラム登録可能

歯科技工用リング焼却炉 一般医療機器 27B2X00306K00028



- 炉内はφ90リングが2個入るワイドな設計になっています。
- 予約タイマー機能付きで、業務に合わせたスケジュール管理が可能です。



プログラム表示
プログラムモード時の各種番号が表示されます



温度表示
現在炉内温度や設定温度を表示します

寸法 W295×H390×D390mm
電力 1100W
保留 1~5段階
最高温度 1000°C
重量 17 k g

リング焼却時の有毒なガスは白金触媒でろ過し、排出する「エースクリーナー」 ※別売品

標準価格
¥288,000 (税別)

SPECIAL PRICE

真空攪拌練和機
Vmixing-D

専用プロペラ羽根で満遍なく攪拌＆真空脱泡

歯科技工用真空攪拌機 一般医療機器 27B2X00306M0001



オプションでスタンド式にも



専用ハネは十分な練り込み効果とかき混ぜ効果を作り出します。

付属品
攪拌カップ 大 (5.0 0ml)
 小 (2.5 0ml)



タイマーはつまみ式で、正確に時間を計測します。スタートストップスイッチに保護カバーを施し、日常のお手入れを簡単にしました。

標準価格
¥185,000 (税別)

SPECIAL PRICE

重量 5.6 k g
エア圧 0.5~0.6MPa
寸法 W214×H229×D188mm
※スタンド使用時
 W220×H565×D215mm

加圧埋没器
バブルリムーバー

真空脱泡で鑄造物を気泡から守る縦型加圧埋没器

歯科技工用加圧埋没機 一般医療機器 27B2X00306K00017



付属品
2段式バスケット



バブルリムーバー-Vを使用することで、埋没起因による鑄造欠陥のリスクを低減します。

外寸法 W282×H350×D180mm
内寸法 φ145×H218mm
 (φ130×H95リング2個収納)
重量 14.5 k g
エア圧 0.2~0.5MPa

標準価格
¥150,000 (税別)

SPECIAL PRICE

横型遠心鑄造機
エンゼルキャスター

縦型遠心鑄造機
C500 II

強力なカートリッジ式バネ採用で長持ち＆経済的

歯科技工用鑄造器関連器具 一般医療機器 27B2X00306K00012



標準価格
¥178,000 (税別)


SPECIAL PRICE

- 95度まで傾斜する2重振子が、初速の遠心力を倍加させます。
- 交換用スプリングはカートリッジ式で簡単に交換できます。
- シンプルな設計で非常に経済的です。

標準価格
¥298,000 (税別)

SPECIAL PRICE

- 鑄造力と安全性を追求した縦型遠心鑄造機です。
- 強力な初速で、高溶解合金に威力を発揮します。
- フットスイッチ操作で鑄造時の作業コントロールがしやすい機種です。

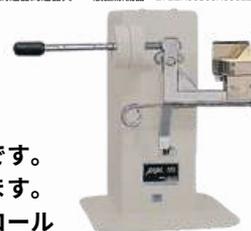

寸法 W560×H580×D280mm
重量 15.5kg

寸法 φ385×H220mm (回転時)
重量 5 k g

歯科技工用鑄造器関連器具 一般医療機器 27B2X00306K00011