

卓上自動研磨機
輝 (TERU)

チタンクラウンの研磨にも使える回転バレル式研磨機

- 技工物を保持具で固定し、回転を加えながら研磨を行う卓上自動研磨機です。
- インレー、クラウン、クラスプ、バーなどの症例を短時間で効率的に研磨します。
- 咬合面や研磨しにくい維持部に効果を発揮します。



歯科
オススメ
技工所



左上 研磨前
左下 中仕上げ後 (湿式)
右上 光沢仕上げ後 (乾式)

研磨時間

研磨物	研磨時間 (中仕上げ)	研磨時間 (光沢仕上げ)
クラウン	5~10分	10~15分
インレー	5~10分	10~15分
ブリッジ	10分~15分	10~15分
クラスプ	10分	10~15分
バー	20分	10~15分

寸法 W270×H460×D430mm
重量 21kg
歯科技工用電気レース 一般医療機器 27E2X00306K00018


標準価格
740,000円 (税別) >>>

大特価

ショット式研磨機
ショットブラスト

適合はそのままに磨きにくい箇所も効率良く研磨

- 金属床、レジン床、ブリッジ症例など、手作業では磨き難い症例に効果を発揮します。
- 専用の弾性樹脂研磨材は、研磨物表面の形状を損なわず滑沢に仕上げます。
- 研磨材は再生処理で繰り返しご使用いただけます。

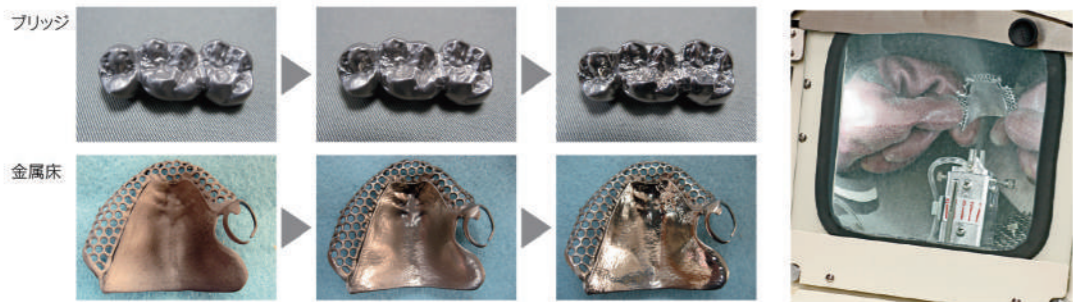

ブリッジ
寸法 W310×H760×D410mm
重量 36kg
エア圧 0.3~0.7MPa
※ショットブラストEZ本体には研磨材は付属していません。
用途に応じて2種類のうち、いずれかをご購入の上、ご使用ください。
歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00024

歯科
オススメ
技工所

標準価格
850,000円 (税別)
>>>

大特価



横型遠心铸造機
エンゼルキャスター

縦型遠心铸造機
C500 II

強力なカートリッジ式バネ採用で長持ち & 経済的

- 95度にまで傾斜する2重振子が、初速の遠心力を倍加させます。
- 交換用スプリングはカートリッジ式で簡単に交換できます。
- シンプルな設計で非常に経済的です。



寸法 φ385×H220mm (回転時)
重量 5kg
歯科技工用精密磨練器具 一般医療機器 27B2X00306K00011

標準価格
178,000円 (税別)
>>>

大特価

歯科
オススメ
技工所

院内
オススメ
技工所

- 铸造力と安全性を追求した縦型遠心铸造機です。
- 強力な初速で、高溶解合金に威力を発揮します。
- フットスイッチ操作で铸造時の作業コントロールがしやすい機種です。

寸法 W560×H580×D280mm
重量 15.5kg
歯科技工用精密磨練器具 一般医療機器 27B2X00306K00012

標準価格
298,000円 (税別)
>>>

大特価



DAIEI
Angel

技工器械

大感謝祭

2025 2月3日~3月19日

年に1度
だから
今がお得!

デンタルスチーマー
ロコモ



パワフルな高圧スチームで高い洗浄効果

オススメ
超白濁!

技工所だけじゃない! 多くの歯科医院で活躍中!

?? 歯科医院での洗浄用途って?

○模型洗浄

トリマー後の石膏カス除去 / 口腔内セット前模型適合確認時 / 模型上での研磨後

○補綴物

ブラスター等の機械的接着処理後 / 適合及び咬合調整後 / 研磨後 / 義歯安定材等の除去時 / 脱離補綴物の再セット前 / 義歯のリペア前後 / 補綴物接着前の最終洗浄 / 可撤式補綴装置の洗浄

寸法 W295×H245×D160mm
※Wはハンドル付きホース部を除く
電力 1450W
重量 12kg
ホース長さ 75cm / 120cm
水タンク 4リットル
別売品 ST壁掛けハンガー



歯科技工用形成器具 一般医療機器 27B2X00306K00003

- 生成される強力なスチームは洗浄力が高く、洗浄時間を大幅に節約できます。
- 本体は非常にコンパクトで、限られたスペースでも設置が可能です。
- シンプルな構造とイオン交換器によるスケール除去で壊れにくい設計です。



ハンドピースホースの長さは75cm/120cmからお選びいただけます。様々な設置環境にも柔軟に対応します。



イオン交換器の働きにより、水道中の不純物(カルキ、ミネラル、スケール)を除去。簡単な定期メンテナンスで、長く快適にご使用いただけます。



壁掛け用ハンガー(別売)をご使用いただくことで、壁面に本体を取り付け可能です。省スペース化と作業性が更に向上します。※詳細は弊社担当までご確認ください。

標準価格
298,000円 (税別)
>>>

歯科
オススメ
医院

歯科
オススメ
技工所

院内
オススメ
技工所

大特価

軟化圧接成型器
デュアルフォーマー


加圧成型で再現性の高いマウスピース製作が可能に!

- 丸型、角形シート材に対応、加圧・吸引両用の軟化圧接成型器です。
- マウスガード、ブリーチングトレイ、ナイトガードなど各種トレイに対応します。
- 辺縁部が封鎖された適合の良いトレイ製作が可能です。



寸法 W285×H440×D280mm
重量 10kg
加圧 0.19~0.59MPa
吸引 700mmHg
別売品 加圧ポット、模型固定用砂

標準価格
278,000円 (税別)

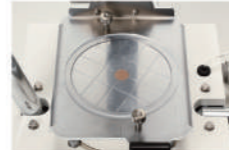

丸型、角型どちらのシート材も使用できます。



模型に高さがある場合やアンダーカットが強い場合は砂の中に模型を設置して製作します。



加圧機能を使用することで、ラミネート(2枚重ね合わせ)タイプのマウスガードも作成が可能です。

歯科
おすすめ
医院

歯科
おすすめ
技工所

院内
おすすめ
技工所

電気ファーンズ
MD-R1

700℃到達まで15分、10通りの焼成プログラム登録可能

- 炉内はφ90リングが2個入るワイドな設計になっています。
- 予約タイマー機能付きで、業務に合わせたスケジュール管理が可能です。
- ヒートショック対応のマイコン電気炉です。




寸法 W295×H390×D390mm
電力 1100W
係留 1~5段階
最高温度 1000℃
重量 17kg

標準価格
288,000円 (税別)



院内
おすすめ
技工所

歯科
おすすめ
技工所

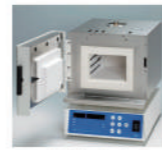

リング焼却時の有毒ガスの漏れを防ぐため扉の密閉度を改良しました。



リング焼却時の有毒なガスを白金触媒でろ過し、排出する「エースクリナー」※別売となります

プログラム表示
プログラムモード時の登録番号を表示します



動作ステージ表示
昇温行程の経過を表示します

温度表示
現在炉内温度や設定温度を表示します

各種設定キー
フラットパネルで軽いタッチで操作できます

電源スイッチ

真空攪拌練和機
Vmixing-D

専用プロペラ羽根で満遍なく攪拌&真空脱泡

- 十分な練り込み効果とかき混ぜ効果を生むために攪拌カップとハネに拘った真空攪拌練和機です。
- 既設のエアーコンプレッサーに接続し、作業中は安定した真空状態に保ちます。
- 壁掛け式とスタンド式(オプション)からお選びいただけます。



標準価格
185,000円 (税別)



歯科
おすすめ
医院

歯科
おすすめ
技工所

院内
おすすめ
技工所



オプションでスタンド式も可能です。



付属品 攪拌カップ 大(500ml) 小(250ml)
別売品 攪拌カップ 特大(1000ml)

専用ハネは十分な練り込み効果とかき混ぜ効果を作り出します。



タイマーはつまみ式で、正確に時間を計測します。スタートストップスイッチに保護カバーを施し、日常のお手入れを簡単にしました。

サンドブラスター
シリーズ

用途や目的に合わせた豊富なバリエーション

- サイクルブラスターJr. 循環式サンドブラスター。院内ラボにもオススメなコンパクトサイズです。
- サイクルジュニアII 2種の研磨材を使用できるタイプ。内面処理に最適なノズルサイズです。
- サイクルジュニアIII 3種の研磨材を使用できるタイプ。作業効率の向上と研磨材を節約できます。



サイクルブラスターJr.
寸法 W300×H380×D330mm
重量 7kg
ペン数 1本
エアー圧 0.29~0.69MPa

サイクルジュニアII
ジュニアIII
寸法 W345×H400×D350mm
重量 10kg (II)、11kg (III)
ペン数 2本 (II)、3本 (III)
エアー圧 0.29~0.69MPa



左:循環式ノズル(φ2.6mm)
右:加圧式ノズル(φ0.8mm)



サイクルジュニアII、IIIの加圧式ノズルは、先端が細くCAD/CAM冠やPEEK材などの内面処理に最適です。



研磨材についてはコチラから

歯科
おすすめ
医院

歯科
おすすめ
技工所

院内
おすすめ
技工所

金属床用サンドブラスター
サンデックスV

面倒な埋没材、酸化膜除去にはパワフルなこの1台!

- 専用研磨材が硬く焼き付いたリン酸塩系埋没材も効率よく剥がします。
- 集塵装置内蔵で集塵用エアノズルの働きにより、ボックス内の粉塵を外に逃がしません。
- 金属床の埋没材及び酸化膜除去に特にオススメです。




寸法 W350×H570×D385mm
重量 15kg
エアー圧 0.39~0.69MPa

標準価格
298,000円 (税別)



歯科
おすすめ
技工所

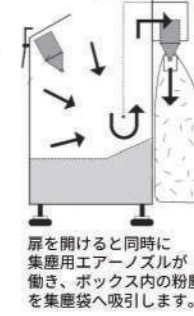

扉を開けると同時に集塵用エアノズルが働き、ボックス内の粉塵を集塵袋へ吸引します。



金属床作成時の埋没材除去に最も効果的です。その後の作業効率を高めます。



広口径φ4mmノズルから専用研磨材(カーボランダム)を強く吹き付け、除去作業の手間を軽減します。



研磨材についてはコチラから

加圧埋没器
バブルリムーバー

真空脱泡で鑄造物を気泡から守る縦型加圧埋没器

- φ130の金属床用リングが2個収納できる縦型加圧埋没器です。
- バスケットが付属しており、簡単に取り出しが可能です。
- 温水を入れたラバーボール等を使用するの義歯修理、レジン重合器としてもご使用いただけます。



外寸法 W282×H350×D180mm
内寸法 φ145×H218mm (φ130×H95リング2個収納)
重量 14.5kg
エアー圧 0.19~0.49MPa

標準価格
150,000円 (税別)



歯科
おすすめ
技工所



付属品 2段式バスケット



エアー配管接続のみのシンプルな設計です。



バブルリムーバーVを使用することで埋没起因による鑄造欠陥のリスクを低減します。

電気レーズ
エンゼルレーズ-D

無段階変速で工程に合わせたスピード調節&ハイトルク!

- つまみ式の刻み目盛りで、正確な回転数を一目で判断できます。
- ネジ式ホルダーを採用し、使用中の緩みや脱落がなく安心です。
- 本体は小型で凹凸が少なく、お手入れしやすいデザインです。



標準価格
135,000円 (税別)



ネジ式ホルダーでしっかりと本体に固定され、脱落を防ぎます。



ON/OFFボタンはフラットで、電源周りの異物混入を回避します。



歯科
おすすめ
医院

歯科
おすすめ
技工所

院内
おすすめ
技工所

CAM用集塵機
XCEL

ハイパワーなのに低価格! モーター長寿命!

- 3,800L/minの高い吸引力で、加工機庫内の切削粉を高回収。加工機の負荷やトラブルを低減します。
- モーターの耐久性は最大5,000時間の長寿命。長く使用できるから安心です。
- ダストボックスも8.71Lと大容量。ゴミを捨てる手間を減らすことができます。



寸法 W316×H589×D342mm
重量 13kg
消費電力 780W
最大空気流量 3,800L/min
最大空気圧 25.6kPa
モータータイプ ブラシレスモーター
フィルタ HEPAフィルタ
ノイズレベル 最大70dB
吸引口内径 48φ

標準価格
350,000円 (税別)



歯科
おすすめ
技工所

院内
おすすめ
技工所

