

ハンドピース専門メーカーナカニシのハンドピースのための滅菌器

# 滅菌応援 キャンペーン

2025

1/21火

3/20木



製品の詳しい  
情報はZ56



# ナカニシ社製滅菌器 iClave mini2 特別価格でご提供致します


※お取引ディーラー様へお問い合わせください

特長  
1

## ハンドピースにやさしく 内部までしっかり滅菌

### 高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

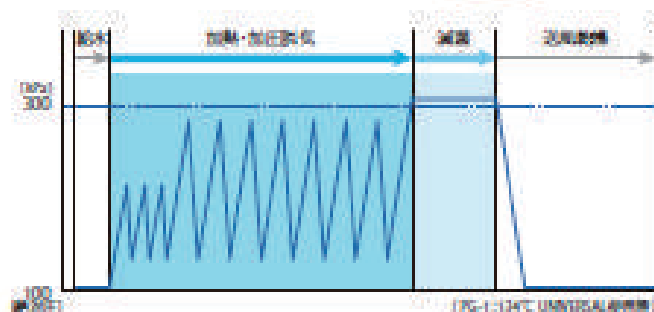

特長  
2

## 優れた操作性で お手入れも簡単

### 見えやすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途にあったプログラの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログラズパーにより、現在の進行状況や残り時間が一目で分かります。

### 使いやすさと清潔性が向上したスマートデザイン

LCDパネル採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



## ヨーロッパ滅菌基準

EN12060:Class 3 規格



セット  
内容

iClave mini2 ユニット / PCスタンド  
仕切りスタンド / 仕切り板(黒)×4  
仕切り板(白) / 排水タンク  
各種基本ホース

仕様

外形寸法 (Fア全開時・H) : W210×D370×H360mm (H600mm) / 乾重量(ユニット本体) : 17.5kg / 電源 : AC100V 50/60Hz  
消費電力 : 750W (定格消費電力750W) / チャンバー寸法 : φ130×L200mm / チャンバー容量 : 2.5L  
給水タンク容量 : 1.5L / 排水タンク外形寸法 : W140×D195×H234mm / 排水タンク容量 : 5L / 排水ホース : 1.5m  
ハンドピース滅菌本数(目安) : 12本(未包装), 6本(一重包装)

プログラム	温度	滅菌時間	包装形態	
PG-1	134℃ UNIVERSAL	134℃	5.5分	一重包装
PG-2	134℃ FAST	134℃	3.5分	未包装
PG-3	121℃ UNIVERSAL	121℃	35.5分	一重包装
PG-4	121℃ FAST	121℃	30.5分	未包装

● UNIVERSAL : 一重包装 / FAST : 未包装 (滅菌器専用使用)  
● 滅菌 (STEERLING) 工程の場合は、加熱 (HEATING) 工程が約 10-20 分続きます。  
● 使用する水は、15µS/cm 以下の超軟水、超軟水、軟水、または、イオン交換水、RO水の使用が推奨されます。  
● 滅菌時の過熱時間は (2-30 分) の設定が可能です。

製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

販売元: アイテック・アビエック / 総代理店: 大栄歯科産業株式会社 / 東京都目黒区青丘1-1-1 TEL: 03-4411-3332 FAX: 03-4411-3333

■ナカニシ社製品販売代理店

Angel 大栄歯科産業株式会社

東京目黒区青丘1-1-1 TEL: 03-4411-3332 FAX: 03-4411-3333  
東京目黒区青丘1-1-1 TEL: 03-4411-3332 FAX: 03-4411-3333  
大阪東淀川区東淀川1-1-1 TEL: 06-6606-1361 FAX: 06-6606-1362  
福岡福岡市東区東区1-1-1 TEL: 092-731-0219 FAX: 092-731-0220  
福岡福岡市東区東区1-1-1 TEL: 092-731-0219 FAX: 092-731-0220

■製品に関するお問い合わせは下記取扱店まで